



センサは膝の中間あたりに設置します。

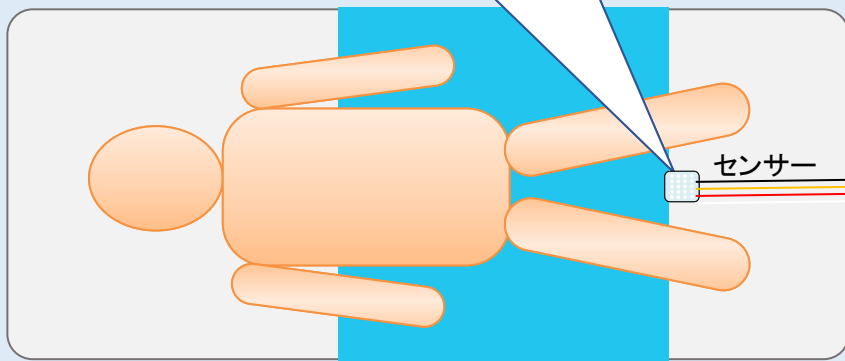

センサーコントローラー

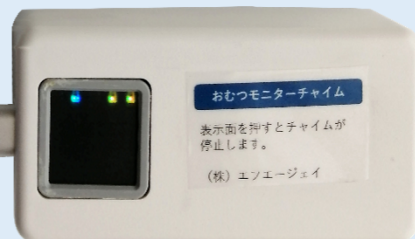

排便・排尿



ワイヤレスチャイム



センサは防水シート外のシートの下に固定します。

### 排便はニオイで、排尿は湿度で判定します。

#### 設置

- ◆ センサは出来るだけお尻に近い所に設置してください。
- ◆ センサーコントローラーの電源はUSB Cコネクターです。
- ◆ 排泄（排便と排尿）でチャイムが鳴ります。
- ◆ ワイヤレスチャイムは見通し100m位先まで電波が届きます。
- ◆ 防水シートの下はセンサが反応しません。
- ◆ 簡易防水のセンサーカバーを付属します。
- ◆ LEDの点灯具合で排便と排尿が区別できます。

#### チャイム

- ◆ チャイムの音量は変更できます。
- ◆ チャイムの曲名変更は、音量ボタンを5秒ほど押し、♪のボタンを押し曲を選択する。

#### 液晶の表示

寝具内温度

34°以上 red  
32°以上 orange  
30°以上 magenta  
28°以上 yellow  
26°以上 green  
26°未満 blue

安眠温度

ニオイレベル

排便レベル

排尿レベル

#### ご使用上の注意

- ◆ 本装置は高度な排泄検知機能を有していますが、排泄は個人や環境によって大きく異なりますので、排泄を検知出来ない時もある事をご承知ください。
- ◆ チャイムは写真と異なる場合があります。

敷布団

シート

センサー